

Fiche technique NEW



Références amd	22023105	22033105	22025005	22035005
Références Finéa	120542	120543	120548	120549
Désignation	Finéa Pant medium Extra	Finéa Pant large Extra	Finéa Pant medium Optimum	Finéa Pant large Optimum
Dimensions tampon (cm)	22x40	24x42	22x40	24x42
Tour de hanche en cm	70 à 120	90 à 150	70 à 120	90 à 150
Poids total (gr) **	85	87	100	105
Capacité d'absorption ISO (ml) *	1 400	1500	2150	2300
Couleur textile backsheet	blanc	blanc	blanc	blanc
Gouttes	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●

Nombre d'unités / sachet	14	14	14	14
Nombre de sachets / carton	6	6	6	6
Dimensions sachet (mm)	370x415+95+40	410x445+95+40	370x415+95+40	410x445+95+40
Nb. Unités / Carton	84	84	84	84
Dimension carton	730x370x235	750x280x340	730x370x235	750x280x340
Nombre de cartons / palette	27	24	27	24
Dimensions format europe (cm)	80 x 120	80 x 120	80 x 120	80 x 120

* Norme Rothwell 11948-1 : Tolérance = +/- 10%

** Tolérance = +/- 10%

Composition

Pâte à papier "fluff" non traitée : de fibres longues spécifiquement destinée à constituer le tampon

Polymer super absorbant : polyacrylates de sodium mélangés dans la partie centrale

Voile externe intraversable : sensation textile (back sheet), toucher coton silencieux

bande d'acquisition : matière spéciale douce qui augmente la rapidité de d'absorption

Barrières anti fuites : non tissé polypropylène, intraversables

Voile interne doux et hypoallergénique : hydrophile, en 100 % fibre de polypropylène spun bonded

Pants FINEA



Extra / Optimum

Incontinence



1 Finéa

Finéa propose un ensemble de solutions pratiques, discrètes et de qualité, pour l'incontinence modérée à forte en garantissant une étanchéité parfaite de nuit comme de jour.

Les protections pour fuites urinaires Finéa sont adaptées à tous et aident à supporter les problèmes de l'incontinence durant la vie quotidienne.

2 Descriptif

Les Pants Finéa vous assurent une absorption maximale longue durée pour plus de sécurité, de confiance et de liberté !

Les Pants Finéa sont des sous-vêtements absorbants mixtes, se mettant comme une culotte ou un slip classique et spécialement conçus pour les personnes mobiles ou semi-mobiles ayant des fuites urinaires légères à fortes. Disponibles en plusieurs absorptions et tailles, les Pants Finéa sont sans latex et sont testés dermatologiquement respectant ainsi le capital cutané.

Hygiéniques et fiables, les Pants Finéa sont équipés d'un système anti-fuites, ainsi que d'un témoin d'humidité. Leur capacité d'absorption et leur système anti-fuites permettent de les porter toute la journée et toute la nuit, empêchant la diffusion des odeurs et maintenant la peau sèche. Les Pants ne se voient pas et possèdent une grande souplesse d'utilisation.

Ces Pants bénéficient des derniers développements dans le domaine de l'absorption et du confort.

Les polymères super-absorbants (SAP) sont répartis de manière homogène et localisée.

Leurs présences permettent de réduire la masse des matières premières et donc d'optimiser l'absorption et le confort de l'utilisateur.

3 Composition

- Partie absorbante constituée de 50 % d'ouate de cellulose blanchie - 50 % de ouate de cellulose non blanchie, polymère super absorbant (polyacrylates de sodium).
- Voile interne doux et hypoallergénique : hydrophile, en 100 % fibre de polypropylène spun bonded.
- Voile externe imperméable, très doux (sensation textile) et silencieux en polyéthylène souple.
- Absorption rapide et totale.
- Renfort élastiqué à la taille et ajustement du tour de cuisses pour un meilleur maintien.
- Barrières anti-fuites intégrale en non tissé hydrophobe.
- Sans latex et sans colle.
- Témoin d'humidité. Capteurs anti odeurs.
- Une meilleure identification produit avec un système de pictogrammes de gouttes pour l'absorption (3 gouttes pour modèle Extra, 5 gouttes pour modèle Optimum et 6 gouttes pour modèle Optimum +).

4 Gammes et références

Extra (carton de 6 sachets de 14).

Nouveau renfort élastique à la taille et ajustement du tour de cuisses pour un meilleur maintien !

Nouveau packaging !

Références	Désignation	Tour de hanche	Absorption en ml / ISO
Réf. 120542	Pant Medium Extra	(70 - 120 cm)	1400 ml
Réf. 120543	Pant Large Extra	(90 - 150 cm)	1500 ml



Optimum (carton de 6 sachets de 14).


Nouveau renfort élastique à la taille et ajustement du tour de cuisses pour un meilleur maintien !

Nouveau packaging !

Références	Désignation	Tour de hanche	Absorption en ml / ISO
Réf. 120548	Pant Medium Optimum	(70 - 120 cm)	2150 ml
Réf. 120549	Pant Large Optimum	(90 - 150 cm)	2300 ml



TECHNIQUE DE POSE FINEA PANT

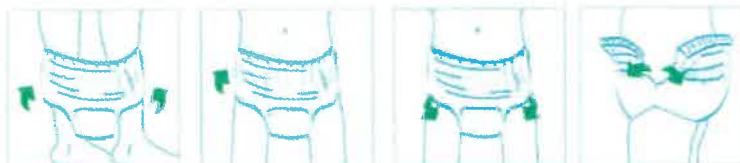

Enfiler le sous-vêtement
Puis le remonter.

Adapter pour un meilleur
maintien et plus de confort

Enlever le sous-vêtement absorbant soit en le descendant
soit en le déchirant sur les côtés.

Correspondances tailles et tours de hanches

Tailles	Tour de Hanche	Taille de vêtement	
1	60 à 80 cm	jusqu'à 36 / 38	Small
2	70 à 110 cm	du 36 à 42 / 44	Medium
3	110 à 160 cm	du 42 à 54 / 58	Large
4	140 à 175 cm	supérieur à 58	Xlarge